

LIPOLASER

S L I M

Rediseña & Modela



Medical Group®


innovation & experience



¿Qué es?

El **Lipoláser Slim** se basa en la combinación de pads de diodos de láser frío de baja intensidad y corrientes polares. Esta técnica favorece el vaciado de las grasas y genera un proceso que provoca la separación de la cadena de los triglicéridos almacenados en ácidos grasos y glicerol.

Por otro lado, y gracias al incremento de la permeabilidad de la pared del adipocito, estas grasas se liberan a través de los poros en la membrana y se ponen en circulación a través del sistema sanguíneo y linfático para su posterior eliminación por vías urinarias y a través del propio ejercicio diario.

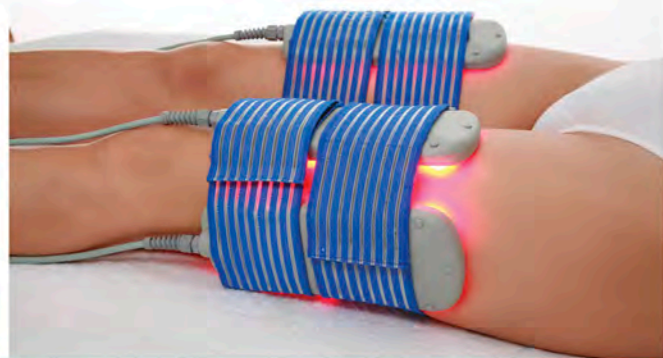

Características técnicas

- Alimentación: AC 220V ± 10% - 50Hz -10A
- Potencia de salida máxima: 90W
- Pantalla: 7 pulgadas
- Longitud de onda: 650nm
- Potencia máxima emitida por pad: 130mW
- Pads grandes: 8 uds. de 8 diodos
- Pads pequeños: 2 uds. de 1 diodo
- Dimensiones del equipo: 35x27x20 cm
- Peso neto: 11 Kg

¿Cómo actúa?

El **Lipoláser Slim** actúa emitiendo una energía que las células grasas van a absorber, y por ello se producirá:

- Un incremento en la permeabilidad de las paredes del adipocito.
- Un aumento del metabolismo celular.
- La activación de la lisis por procesos enzimáticos naturales (lipasa), que va a convertir las cadenas de ácidos grasos pesados (tri glicéridos) en otros más ligeros (ácidos grasos y glicerol) que son consumidos por el organismo de forma natural.
- La vasodilatación por estímulo que va a modificar el metabolismo de las células, permitiéndoles aumentar sus intercambios y mejorar su nutrición.

Este tratamiento para poder obtener un mayor resultado, se tiene que realizar una o dos veces por semana y combinarlo con otras técnicas como **drenaje linfático o presoterapia**.

¿Que ventajas ofrece?

- Técnica indolora, no invasiva.
- Técnica de aplicación, manos libres.
- Efecto reafirmante y modelante.
- Mejora de la celulitis y circulación.
- Disminución de la grasa corporal.
- Oxigenación y nutrición de la piel.



S L I M

Rediseña & Modela



Medical Group
43580 Deltebre
Tarragona
Pol.Ind. Les Molines
"Parcela 3,6 A"
Tel. 672 469 369
977 481 519
info@medicaltechnology.es
www.medicaltechnology.es